


1 Electrodos

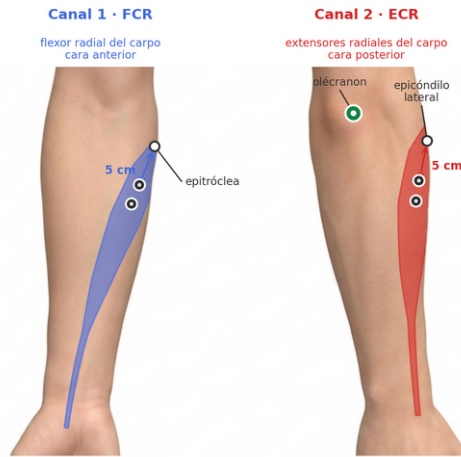

canal 1 FCR · canal 2 ECR · una referencia, en el olécranon

2 Conectar

Contracción agonista / antagonista ▼

Conectar

con la placa encendida · en «Identificador de prueba», un código, nunca el nombre

3 Grabar

Iniciar grabación

Calentamiento primero

10

Dos o tres contracciones suaves de cada músculo. El primer esfuerzo máximo de una sesión nunca es el más fuerte.

calentamiento: 10 s, 2 o 3 contracciones suaves

4 Calibración

Calentamiento

10 s
2 o 3 contracciones suaves de cada músculo

FCR

3 esfuerzos máximos de 1.5 s

ECR

3 esfuerzos máximos de 1.5 s

Cada esfuerzo: aviso de 3 s → una sacudida breve y explosiva en los 1.5 s de la cuenta → descanso de 2 s



Cuando pone FCR

sacudida de flexión de muñeca a máxima potencia, puño cerrado con toda la fuerza




Cuando pone ECR

sacudida de extensión de muñeca a máxima potencia, mano abierta, dedos a tope

3 × FCR · 3 × ECR · una sacudida explosiva en los 1.5 s de cada aviso

5 La tarea

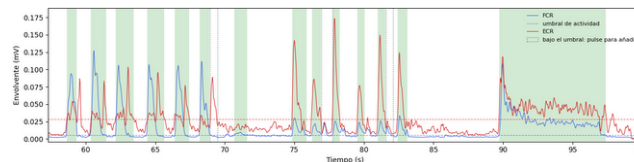

Detener grabación

6 flexiones · 6 extensiones · 1 presa de 8 s apretando la pelota · 2 s quieto entre maniobras

6 Analizar

Seleccionar fragmentos...

Conservar

Descartar

Dividir

Usar estos fragmentos

Generar informe PDF

la línea amarilla dice el paso; al final, el informe PDF