



1 Electrodo

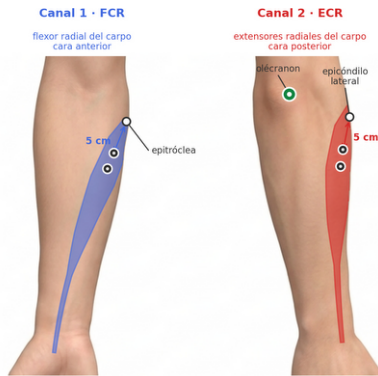

canal 1 FCR · canal 2 ECR · una referencia, en el olecranon

2 Conectar

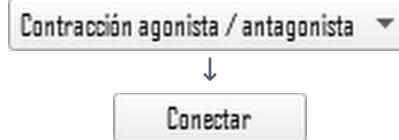

con la placa encendida · en «Identificador de prueba», un código, nunca el nombre

3 Grabar

Iniciar grabación

Calentamiento primero

10

Dos o tres contracciones suaves de cada músculo. El primer esfuerzo máximo de una sesión nunca es el más fuerte.


calentamiento: 10 s, 2 o 3 contracciones suaves

4 Calibración



3 × FCR · 3 × ECR · una sacudida explosiva en los 1.5 s de cada aviso

5 La tarea

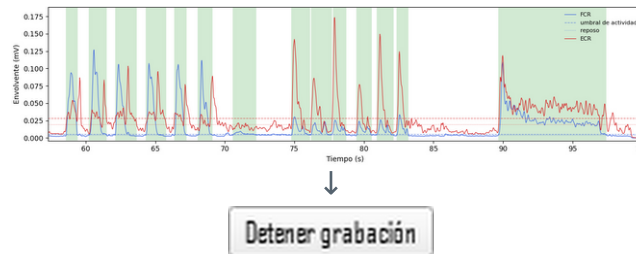

6 flexiones · 6 extensiones · 1 presa de 8 s apretando la pelota · 2 s quieto entre maniobras

6 Analizar

Seleccionar fragmentos...

Conservar Descartar Dividir

Usar estos fragmentos

Generar informe PDF

la línea amarilla dice el paso; al final, el informe PDF

Si no conecta: si la placa no contesta, espera el aviso y pulsa «Reintentar»; si Windows da error al abrir el puerto, apaga y enciende la placa y vuelve a pulsar «Iniciar grabación».

En el análisis: comprueba que cada contracción tiene su fila; las muy breves pueden salir punteadas o sin marcar, y se añaden a mano (pulsando la punteada o con «Añadir fragmento»).

¿Dudas? El «?» de cada cuadro de la aplicación lo explica.