



1 Electrodos

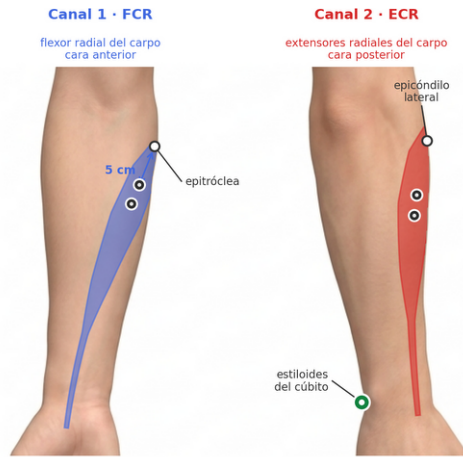

canal 1 FCR · canal 2 ECR · referencia sobre el cúbito

2 Conectar

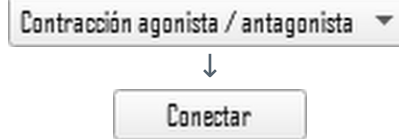

con la placa encendida · en «Identificador de prueba», un código, nunca el nombre

3 Grabar

Iniciar grabación



Calentamiento primero

10

Dos o tres contracciones suaves de cada músculo. El primer esfuerzo máximo de una sesión nunca es el más fuerte.


calentamiento: 10 s, 2 o 3 contracciones suaves

4 Calibración



3 × FCR · 3 × ECR · una sacudida explosiva en los 1.5 s de cada aviso

5 La tarea

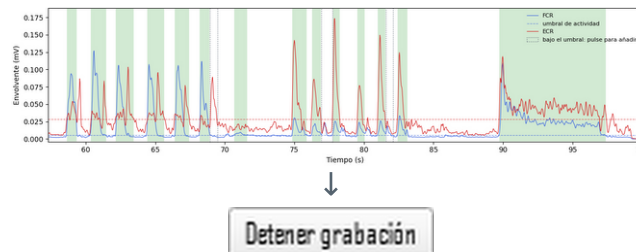

6 flexiones · 6 extensiones · 1 presa de 5 s · 2 s quieto entre maniobras

6 Analizar



la línea amarilla dice el paso; al final, el informe PDF