


Informe de registro y análisis de EMG

Fecha de generación: 2026-09-13 08:15

Identificador de prueba: P01

Archivo: ejemplo.edf

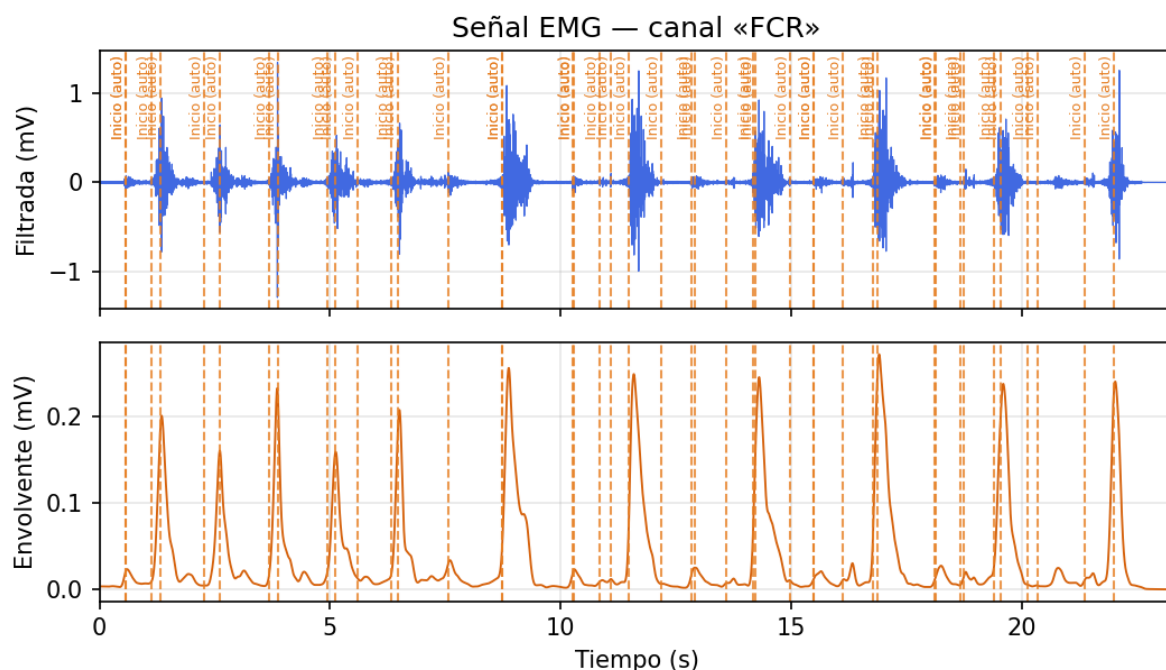

Métricas

Métrica	Valor
Duración	23.3 s
Ventana analizada	116.70-140.00 s de 140.0 s
RMS global	0.0876 mV
Frecuencia media (MNF)	142.3 Hz
Frecuencia mediana (MDF)	126.5 Hz
iEMG	0.806 mV·s
Evidencia de fatiga	No concluyente: la tendencia no ajusta (+0.20 Hz/s, $R^2=0.00$). La fatiga necesita un

Calibración (contracción voluntaria máxima)


Músculo	Referencia	Procedencia
FCR	0.218 mV	calibración de este registr
ECR	0.173 mV	calibración de este registr

Repeticiones de la calibración

Músculo	Repetición	Valor
FCR	1	0.218 mV
FCR	2	0.179 mV
FCR	3	0.160 mV

FCR	4	0.140 mV
FCR	5	0.130 mV
FCR	6	0.148 mV
ECR	1	0.120 mV
ECR	2	0.120 mV
ECR	3	0.173 mV
ECR	4	0.131 mV
ECR	5	0.136 mV
ECR	6	0.119 mV

Contracciones

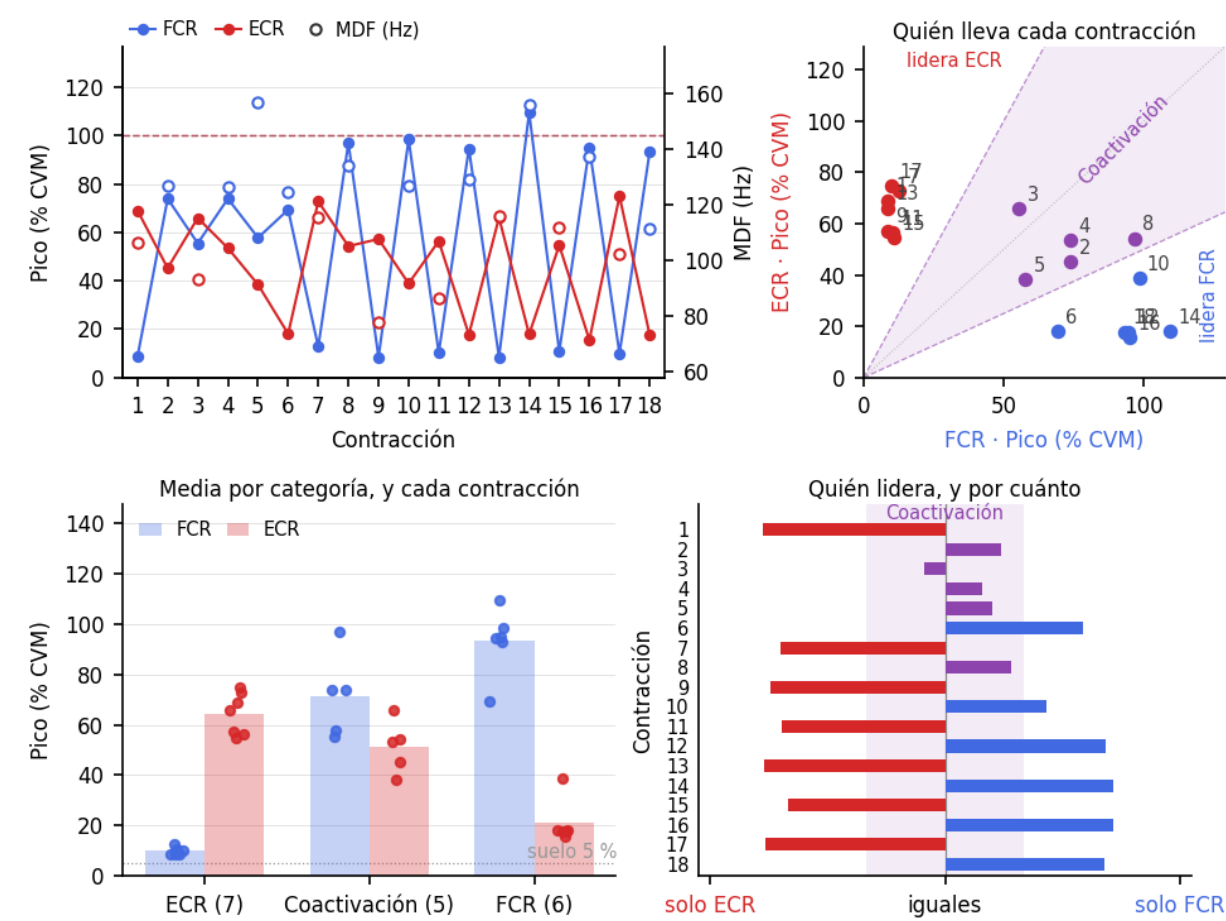

#	Inicio (s)	Duración (s)
1	0.5	0.42
2	1.2	1.02
3	2.4	0.95
4	3.7	0.97
5	4.9	1.05
6	6.3	0.54
7	7.2	0.63
8	8.6	0.75
9	10.2	0.52

10	11.4	0.65
11	12.8	0.55
12	14.1	0.75
13	15.4	0.57
14	16.7	0.75
15	18.1	0.54
16	19.3	0.72
17	20.1	1.20
18	21.5	1.12

Coactivación (Falconer-Winter)

Registro completo — acepte los fragmentos para tener un valor por ventana

Ventana	FCR — Activación media (ECG-M)	Activación media (ECG-M) de coactivación
Registro completo (0.0–23.3 s)	14	11
		30 %

Configuración utilizada

Parámetro	Valor
Frecuencia de muestreo	1000 Hz
Canal	FCR
Paso-banda	20.0-450.0 Hz
Notch (red)	50.0 Hz
Envolvente (paso-bajo)	5.0 Hz
Ventana RMS	50.0 ms
Sensibilidad de detección (k)	4.4
Dispositivo	no almacenado en el EDF