


Informe de registro y análisis de EMG

Fecha de generación: 2026-09-14 10:06

Identificador de prueba: P01

Archivo: ejemplo.edf

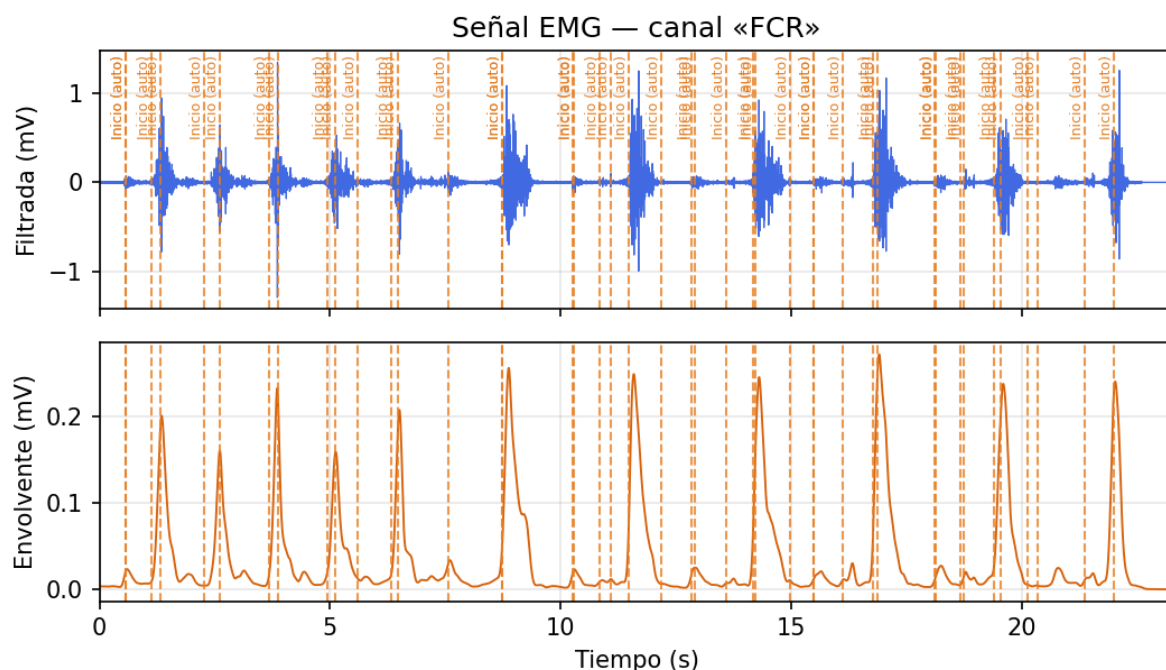

Métricas

Métrica	Valor
Duración	23.3 s
Ventana analizada	116.70-140.00 s de 140.0 s
RMS global	0.0876 mV
Frecuencia media (MNF)	142.3 Hz
Frecuencia mediana (MDF)	126.5 Hz
iEMG	0.806 mV·s
Evidencia de fatiga	No concluyente: la tendencia no ajusta (+0.22 Hz/s, $R^2=0.01$). La fatiga necesita un

Calibración (contracción voluntaria máxima)


Músculo	Referencia	Procedencia
FCR	0.271 mV	calibración de este registr
ECR	0.197 mV	calibración de este registr

Repeticiones de la calibración

Músculo	Repetición	Valor
FCR	1	0.271 mV
FCR	2	0.220 mV
FCR	3	0.193 mV

FCR	4	0.166 mV
FCR	5	0.157 mV
FCR	6	0.200 mV
ECR	1	0.160 mV
ECR	2	0.138 mV
ECR	3	0.197 mV
ECR	4	0.159 mV
ECR	5	0.178 mV
ECR	6	0.163 mV

Contracciones

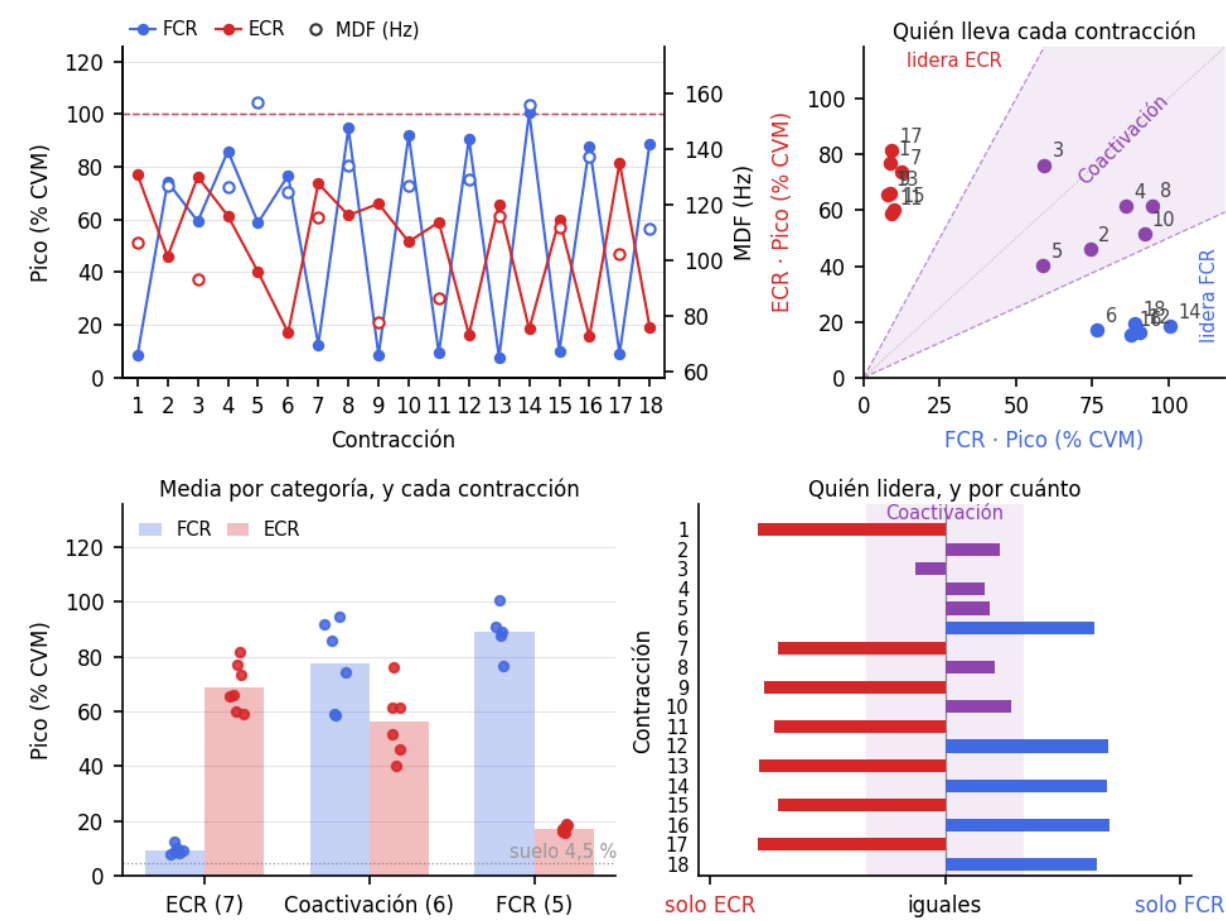

#	Inicio (s)	Duración (s)
1	0.5	0.42
2	1.2	1.02
3	2.4	0.95
4	3.7	0.97
5	4.9	1.05
6	6.3	0.54
7	7.2	0.63
8	8.6	0.75
9	10.2	0.52

10	11.4	0.65
11	12.8	0.55
12	14.1	0.75
13	15.4	0.57
14	16.7	0.75
15	18.1	0.54
16	19.3	0.72
17	20.1	1.20
18	21.5	1.12

Coactivación (Falconer-Winter)

Registro completo — acepte los fragmentos para tener un valor por ventana

Ventana	FCR — Activación media (ECM)	Activación media (ECM)	Porcentaje de coactivación
Registro completo (0.0–23.3 s)	12	10	31 %

Configuración utilizada

Parámetro	Valor
Frecuencia de muestreo	1000 Hz
Canal	FCR
Paso-banda	20.0-450.0 Hz
Notch (red)	50.0 Hz
Envolvente (paso-bajo)	5.0 Hz
Ventana RMS	50.0 ms
Sensibilidad de detección (k)	4.4
Dispositivo	no almacenado en el EDF