


Informe de registro y análisis de EMG

Fecha de generación: 2026-09-26 13:15

Identificador de prueba: P01

Archivo: ejemplo.edf

Protocolo: Contracción agonista / antagonista

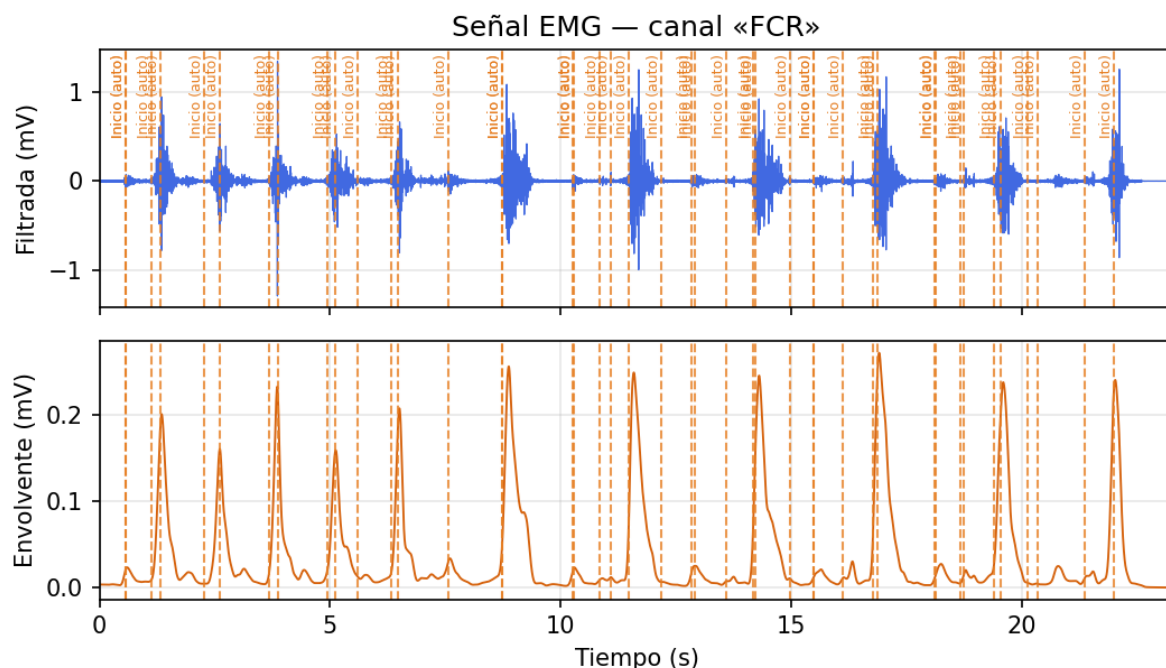

Métricas

Métrica	FCR	ECR
Duración	23.3 s	
Ventana analizada	116.70-140.00 s de 140.0 s	
RMS global	0.0876 mV	0.0526 mV
Frecuencia media (MNF)	142.3 Hz	106.9 Hz
Frecuencia mediana (MDF)	126.5 Hz	93.1 Hz
iEMG	0.806 mV·s	0.617 mV·s
Evidencia de fatiga	No concluyente: la tendencia no ajusta (+0.22 Hz/s, $R^2=0.01$). La fatiga necesita una contracción mantenida el tiempo suficiente para que la tendencia se vea.	No concluyente: la tendencia no ajusta (+0.18 Hz/s, $R^2=0.00$). La fatiga necesita una contracción mantenida el tiempo suficiente para que la tendencia se vea.


Calibración (contracción voluntaria máxima)

Músculo	Referencia	Procedencia	Máximo de la tarea
FCR	0.271 mV	calibración de este registro (6 repeticiones)	101 % CVM (pico de la envolvente)
ECR	0.197 mV	calibración de este registro (6 repeticiones)	82 % CVM (pico de la envolvente)

Repeticiones de la calibración

Músculo	Repetición	Valor	El otro músculo mientras tanto
FCR	1	0.271 mV	29 %
FCR	2	0.220 mV	21 %
FCR	3	0.193 mV	22 %
FCR	4	0.166 mV	27 %
FCR	5	0.157 mV	22 %
FCR	6	0.200 mV	18 %
ECR	1	0.160 mV	10 %
ECR	2	0.138 mV	10 %
ECR	3	0.197 mV	17 %
ECR	4	0.159 mV	17 %
ECR	5	0.178 mV	14 %
ECR	6	0.163 mV	9 %

Contracciones

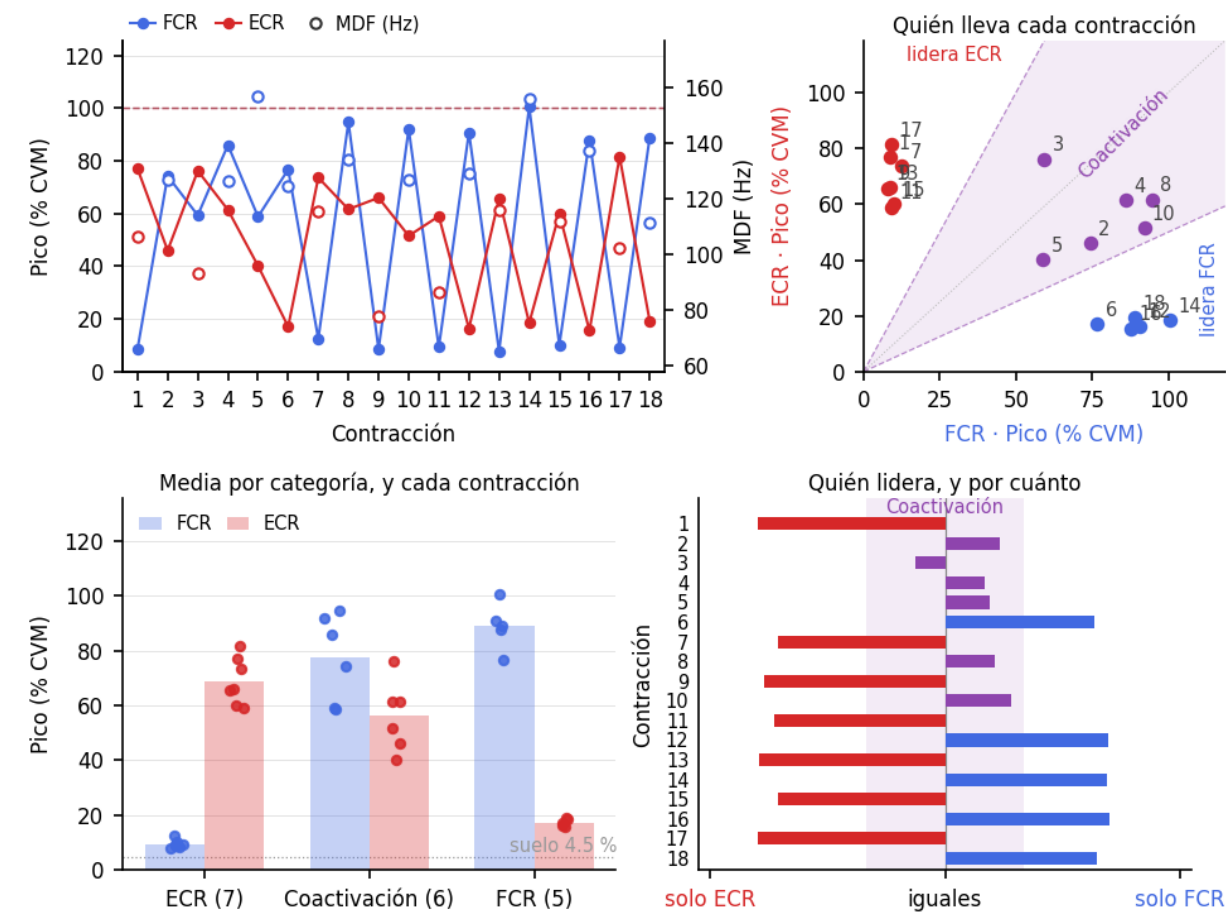

#	Inicio (s)	Duración (s)	Músculo	RMS (mV)	Pico (% CVM)	MDF (Hz)
1	0.5	0.42	ECR	0.119	77	107
2	1.2	1.02	Coactivación	0.111	74	127
3	2.4	0.95	Coactivación	0.076	76	93
4	3.7	0.97	Coactivación	0.119	86	126
5	4.9	1.05	Coactivación	0.082	59	157
6	6.3	0.54	FCR	0.133	77	124

#	Inicio (s)	Duración (s)	Músculo	RMS (mV)	Pico (% CVM)	MDF (Hz)
7	7.2	0.63	ECR	0.097	74	115
8	8.6	0.75	Coactivación	0.172	95	134
9	10.2	0.52	ECR	0.088	66	78
10	11.4	0.65	Coactivación	0.189	92	127
11	12.8	0.55	ECR	0.082	59	86
12	14.1	0.75	FCR	0.163	91	129
13	15.4	0.57	ECR	0.105	66	116
14	16.7	0.75	FCR	0.190	101	156
15	18.1	0.54	ECR	0.084	60	112
16	19.3	0.72	FCR	0.158	88	137
17	20.1	1.20	ECR	0.083	82	102
18	21.5	1.12	FCR	0.121	89	111

Coactivación (Falconer-Winter)

Registro completo — acepte los fragmentos para tener un valor por ventana

Ventana	FCR — Activación media (% CVM)	ECR — Activación media (% CVM)	Índice de coactivación
Registro completo (0.0–23.3 s)	12	10	31 %

Configuración utilizada

Parámetro	Valor
Frecuencia de muestreo	1000 Hz
Canal	FCR, ECR
Paso-banda	20.0-450.0 Hz
Notch (red eléctrica)	50.0 Hz
Envolvente (paso-bajo)	5.0 Hz
Ventana RMS	50.0 ms
Sensibilidad de detección (k)	4.4
Dispositivo	BITalino